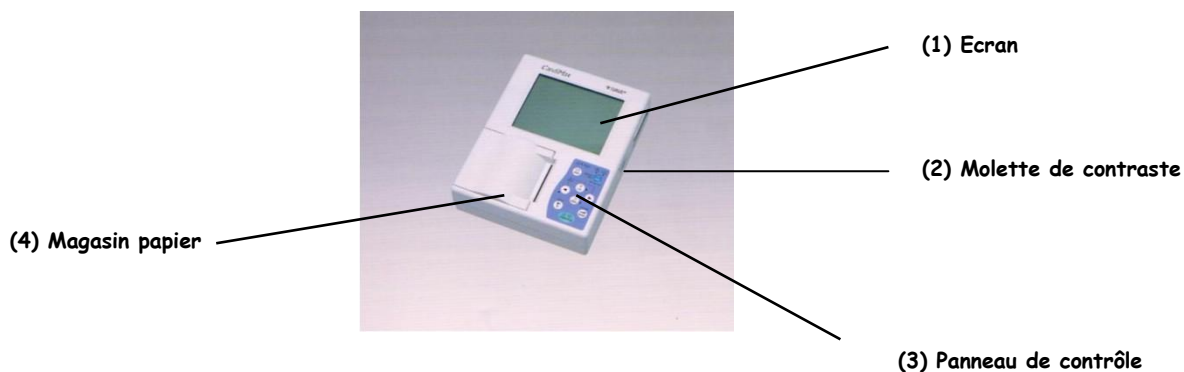




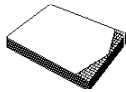



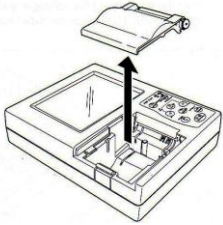
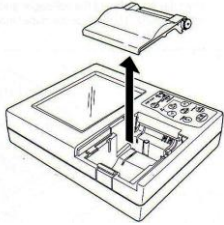
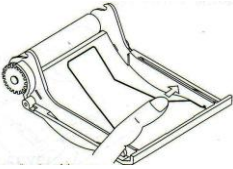
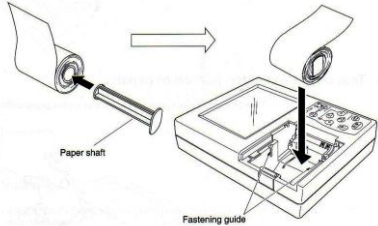
Mode d'emploi simplifié du FX 7102 - FCP7101





Ce manuel simplifié ne doit pas se substituer à la lecture du manuel d'utilisation fourni par le fabricant

1 Présentation de l'appareil




2 Mise en place du papier


<p><u>Liasse</u></p> 	<p><u>Rouleau</u></p> 
<p>Appuyez sur le bouton d'ouverture du magasin papier</p> 	<p>Appuyez sur le bouton d'ouverture du magasin papier</p> 
<p>Enlever le cache du magasin papier</p> 	<p>Enlever le cache du magasin papier</p> 
<p>Le guide doit être installé sur le magasin papier</p> 	<p>Insérer l'axe dans rouleau et le positionner dans le guides</p> 
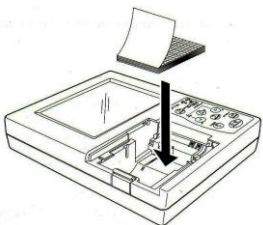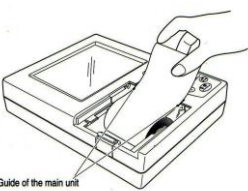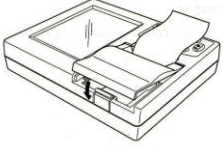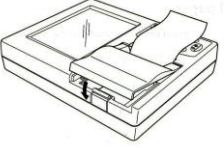
<p>Positionner le papier dans son guide en mettant les carrés noirs vers le bas</p> 	<p>Dérouler environ 3 cm du rouleau</p> 
<p>Repositionner le magasin papier et le refermer</p> 	<p>Repositionner le magasin papier et le refermer</p> 

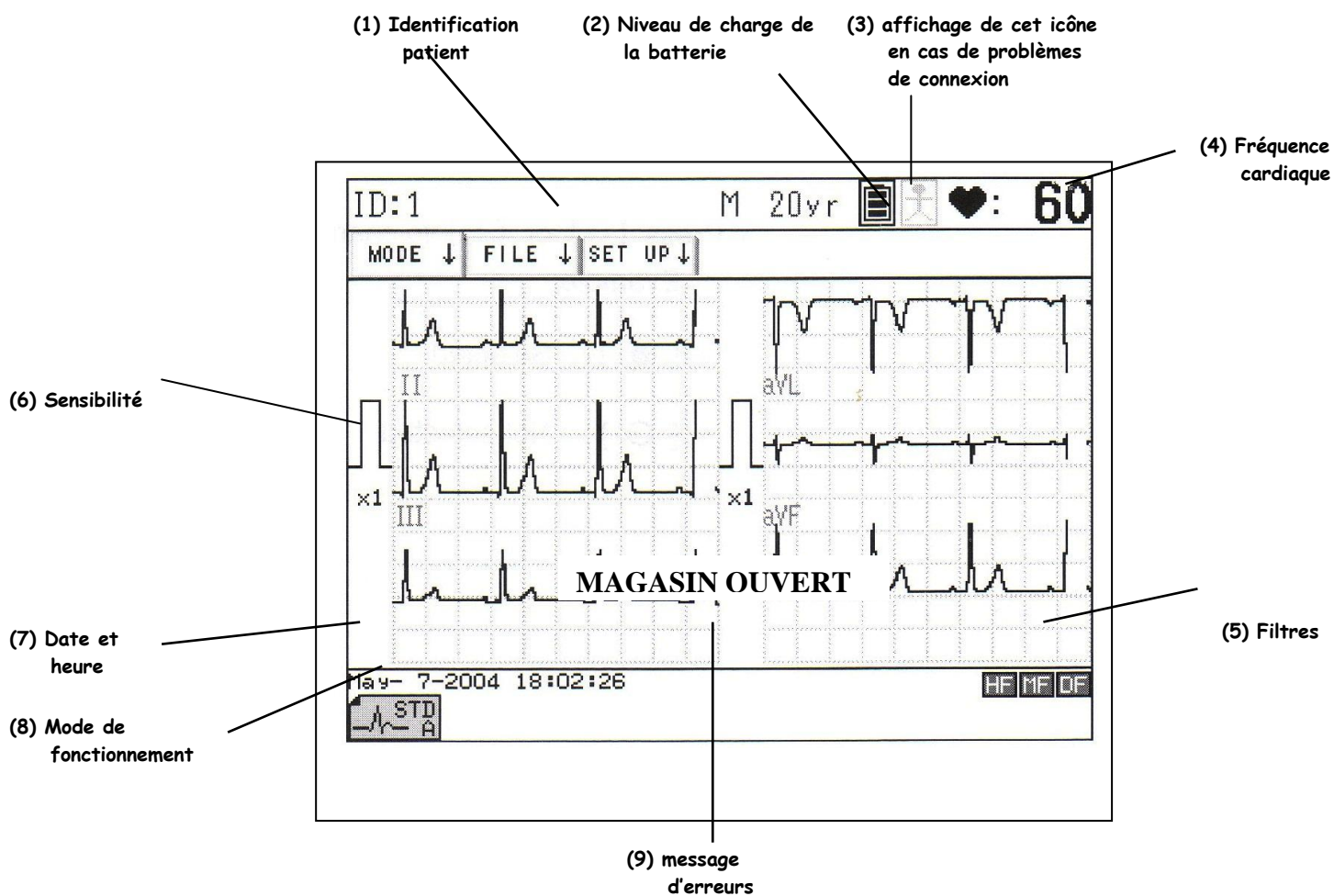3 Fonctions à l'écran



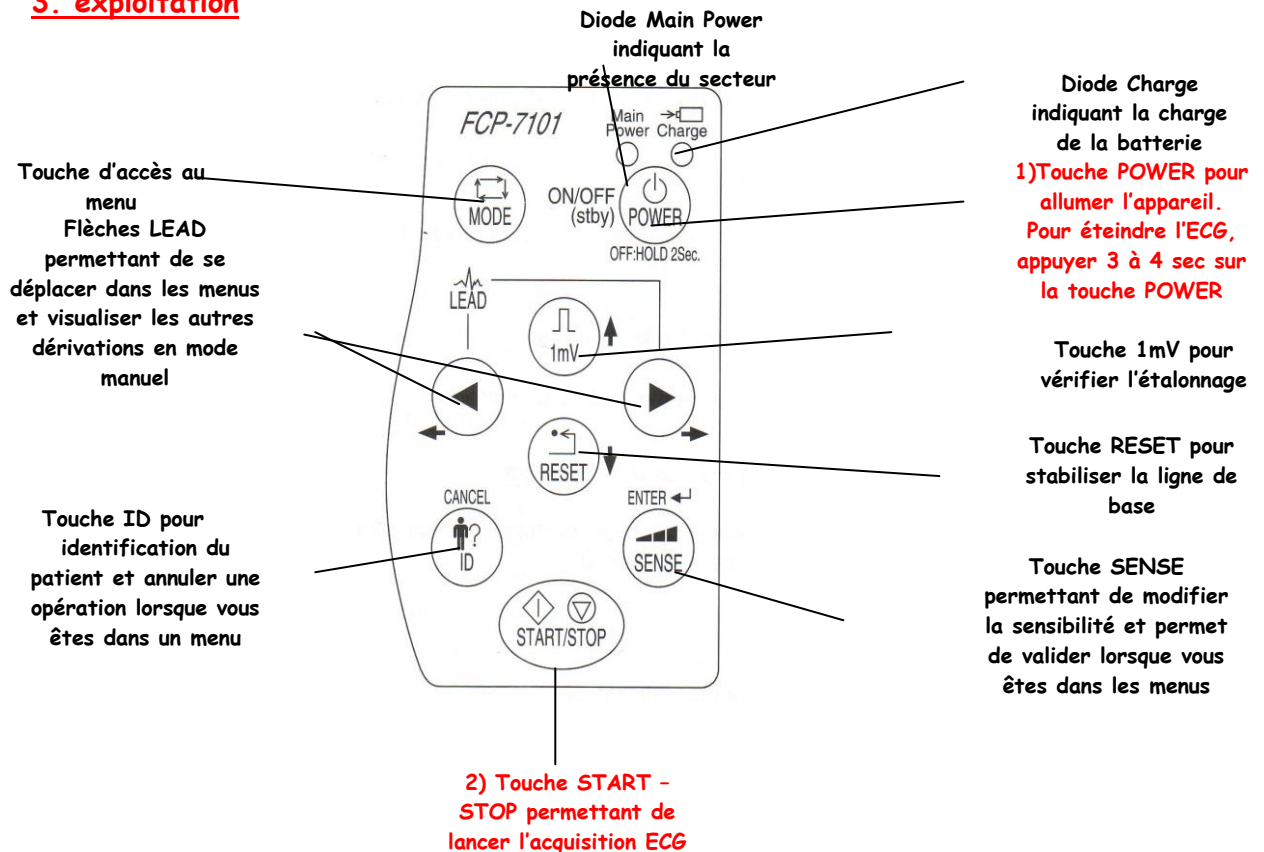3. exploitation




Renseignement des informations du patient : (important si utilisation du FCP7101 pour interprétation des tracés)



Pressez la touche « **ID** ». Appuyez une fois sur la flèche de droite « **LEAD** » si vous souhaitez renseigner un numéro d'identification et valider avec la touche « **SENSE** ». Pressez la touche « **RESET** » (flèche vers le bas) pour descendre sur l'article « **SEX** » puis flèche de droite « **LEAD** » pour renseigner le sexe du patient. Pressez ensuite la touche « **RESET** » pour descendre sur l'âge, flèche de droite pour mettre en surbrillance puis la touche « **1mV** » pour incrémenter l'âge.

Valider avec la touche « **ID** ».

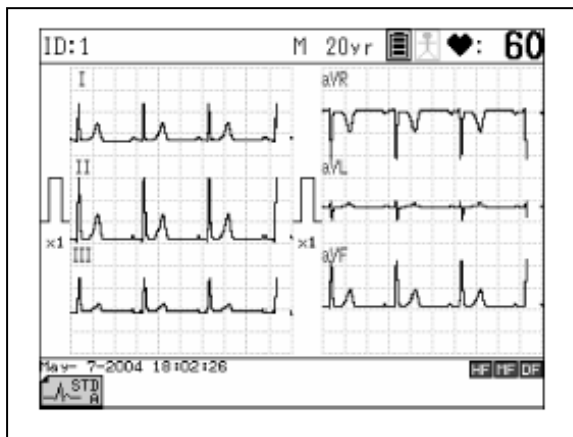Acquisition mode automatique :




« **STD A** » sera alors affiché en bas à gauche de l'écran. Lorsque les dérivations seront stables, presser la touche « **START-STOP** » sur le clavier. Le message « mesurer » s'affiche et l'acquisition débute. L'impression commence au bout de 6 secondes environ. Si « **STD M** » est affiché, presser la touche « **Mode** » sur le clavier, puis la touche « **1 mV** » et sélectionner « **STANDARD ECG MODE (AUTO)** »

Acquisition mode manuel :

Pour passer en mode manuel, presser la touche « **Mode** » sur le clavier. Avec la touche « **RESET** », sélectionner « **STANDARD ECG MODE (MANUAL)** » et valider avec la touche « **SENSE** ». « **STD M** » sera alors affiché en bas à gauche de l'écran. Lancer l'impression en appuyant sur la touche verte « **START-STOP** ». Changer les dérivations en appuyant sur les flèches « **LEAD** » sur le clavier. Presser « **START-STOP** » pour arrêter l'impression.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

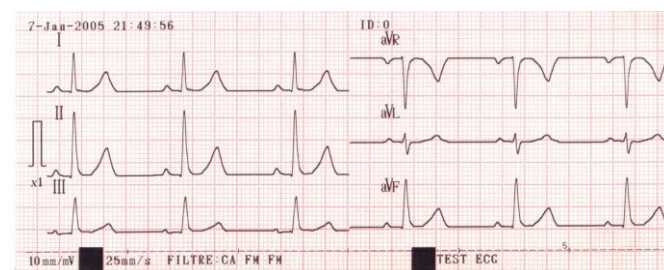✚ Mise en place du papier en liasse :



Les carrés noirs doivent être impérativement disposés vers le bas comme ci-dessus.

✚ Batterie :

Elle doit être rechargée régulièrement et dispense d'environ 3 heures autonomie

✚ Contraste :

Bien vérifier le réglage de la molette dans le cas d'un affichage trop clair ou trop foncé.

✚ Filtres

Vérifier impérativement l'activation des différents filtres